




Le Mascherine Chirurgiche **BioMec**, Bianco e **Azzurro**, sono oggi integrate con il nuovo articolo **BM-HPRO IIC** riguardante la linea **Colors**.



Distribuite nei seguenti formati

Denominazione e Codice	Confezione Minina/UV	Stato singolo pezzo	Dim. mascherina	Dim. Imballo Secondario
BM-HPRO IIC BM201759502C-...	N° 1200 pz	240 buste sigillate termosaldate (5pz "monocolore" per busta) in Americana ANCHE con buste monocolore assortite	175x95 mm	420x420 H325
BM-HPRO IIC BM201759502C-S	N° 1200 pz	200 buste sigillate termosaldate (6pz "ASSORTITI" per busta) in Americana	175x95 mm	420x420 H325



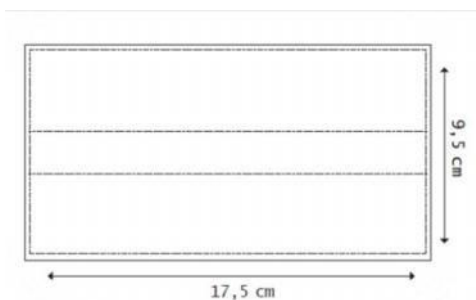

INDICAZIONI D'USO

La Mascherina Chirurgica di Tipo II **BioMec BM-HPRO IIC** è una maschera facciale ad uso medico che, coprendo naso e bocca, provvede a creare una barriera per minimizzare la trasmissione diretta di agenti infettivi tra il personale medico ed i pazienti.

Le maschere facciali ad uso medico di Tipo II dovrebbero essere utilizzate come minimo per i pazienti e per altre persone per ridurre il rischio di diffusione delle infezioni, in particolare in situazioni epidemiche o pandemiche. Le maschere di tipo II sono destinate principalmente all'uso da parte degli operatori sanitari in sala operatoria o in altre attività mediche con requisiti simili.

La Mascherina Chirurgica di Tipo II **BioMec BM-HPRO IIC** è un dispositivo **monouso**.

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO

- Dispositivo a 3 strati senza cuciture
- BFE \geq 98%
- Biocompatibile
- Con ampia zona filtrante in grado di permettere una facile respirazione
- Non contiene cellulosa, non contiene fibre di vetro
- Non contiene lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata
- Facilmente adattabile alla forma del viso grazie alle pieghe ed alla barretta nasale deformabile
- Made in Italy, tempestività e continuità nella fornitura

COMPOSIZIONE CHIMICA DEL DISPOSITIVO

La composizione chimica del prodotto è la seguente:

- Strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto (TNT) Spunbond in polipropilene 25 grammi/m²
- Strato intermedio: tessuto non tessuto (TNT) Meltblown in polipropilene 25 grammi/m²
- Strato esterno: tessuto non tessuto (TNT) Spunbond Tinto in polipropilene 25 grammi/m².

Il dispositivo non contiene cellulosa, non contiene fibre di vetro, non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.